

Ledelys – mod faldulykker



Hvad er ledelys?

Ledelys kan fx vise vej til badeværelset, når en beboer står ud af sin seng om natten. Der kan anvendes en eller flere lyskilder – alt efter afstanden til badeværelset.

Undgå faldulykker

Når lyset automatisk leder vejen til og fra badeværelset, undgår beboeren at lede efter lamper eller at blive forvirret i mørket. Og så hjælper lyset naturligvis med, at beboeren ikke falder over møbler, eller andre genstande, i nattens mørke.

Nem installation og indstilling af funktioner

En af lyskilderne skal være en controller, som blot sættes i en stikkontakt. Fra controlleren har personalet nem adgang til alle funktioner. Det kan typisk være, at ledelys udelukkende skal tænde og slukke om natten.

Det kan også være, at personalet ønsker en alarm, hvis beboeren ikke returnerer til sin seng i løbet af en bestemt tidsperiode. Hvis en fastsat tid overskrides kan det skyldes, at beboeren er faldet.

En del af kaldeanlægget eller "stand-alone"

Ledelys kan indgå som en del af TeleVagt-systemet, men kan også fungere selvstændigt, hvis man ønsker det. Både controlleren og de ekstra lyskilder skal blot sættes i en stikkontakt, så det er nemt og hurtigt at komme i gang.


Flere muligheder

Udover at lyset kan tændes, når en beboere træder ud af sengen, kan det også ske, når en dør åbnes.




Funktioner og fordele

- Undgå faldulykker om natten
- Alarm ved lang tid på badeværelset
- Registrering, når der trædes ud af sengen
- Nem at betjene for personale
- Nem og hurtig installation
- Kan benyttes i TeleVagt-systemet og som "stand-alone"

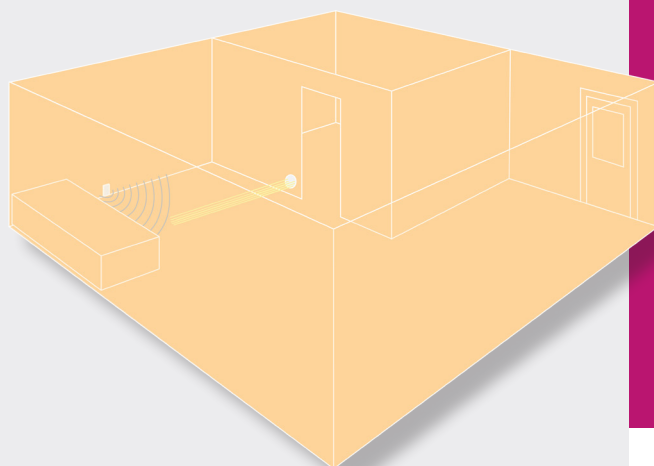

Af illustrationen herover fremgår en enkelt løsning med en sensor ved sengen og en enkelt lyskilde ved badeværelset.

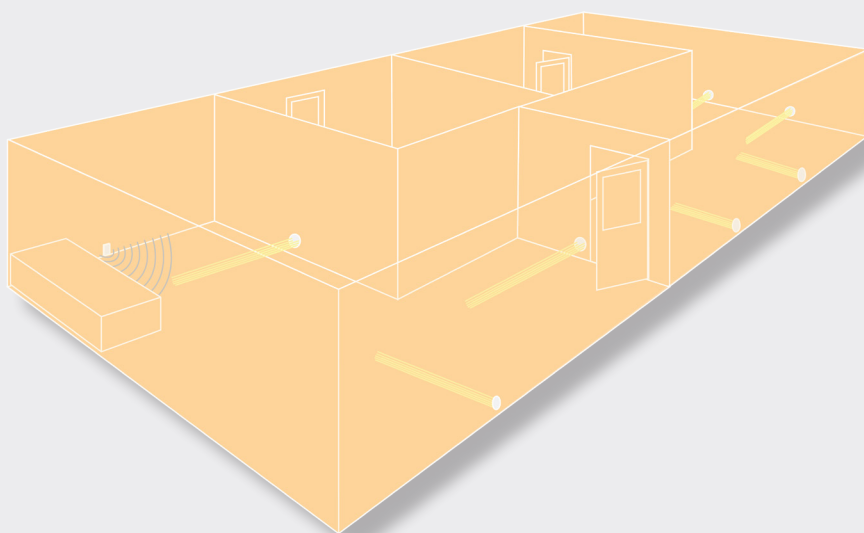

På illustrationen herover vises, hvordan ledelys kan guide en beboer rundt på gangarealer – med hjælp fra flere lyskilder.

Tunstall A/S
 Niels Bohrs Vej 42, Stilling
 8660 Skanderborg
 Tel: +45 87 93 50 00
 info@tunstallnordic.com
 www.tunstall.dk